

TouchCare® Nano

Inzulinska Patch pumpa

Sada s opcionalnim upravljanjem pametnim telefonom

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bezkateterska, vodootporna¹, neupadljiva
- Mala, lagana Patch pumpa (40,5 mm x 31,5 mm x 11,5 mm; 13,8 g)
- Do 3 dana kontinuirane isporuke inzulina zamjenjuje višestruke dnevne injekcije
- Bežični daljinski upravljač – intuitivan uređaj PDM sa zaslonom u boji osjetljivim na dodir za diskretno upravljanje sustavom
- Opcionalno upravljanje putem pametnog telefona i aplikacije EasyPatch App
- Bolus kalkulator ugrađen u uređaj PDM i aplikaciju EasyPatch App
- Može se nositi na ruci, trbuhu, donjem dijelu leđa ili natkoljenici
- Mogućnost integracije s Medtrum CGM
- Kada je pumpa integrirana s Medtrum CGM dostupna je funkcija suspenzije inzulina kod prediktivne/niske razine glukoze (polu-zatvorena petlja) ili opcionalno funkcija AUTO MODE (hibridna petlja) s APGO algoritmom (Artificial Pancreas Algorhytm)
- Zaštićeni i u budućnosti zbog ažuriranja softvera na daljinu
- Spremnik za jednokratnu upotrebu prihvaća maksimalno 200 jedinica, minimalno punjenje spremnika 70 jedinica (U100 brzodjelujući inzulini)

- Baza pumpe za višekratnu upotrebu
- Kanila od nehrđajućeg čelika promjera 30G, ručno umetanje pod 90°
- Sigurnosna upozorenja i alarmi na pumpi i uređaju PDM i aplikaciji EasyPatch App
- Dnevnik događaja za bilježenje tjelovježbe, zdravstvenog stanja, injekcija inzulina, GUK i ugljikohidrata
- Dozvoljeno za korištenje za dob od 2 godine i više



SOFTVER I APLIKACIJE (iOS i android)

- Aplikacija EasyPatch App – Omogućuje korisnicima da upravljaju svojom inzulinskom pumpom koristeći svoj pametni telefon, bez upotrebe uređaja PDM. Podatci se automatski učitavaju i u Medtrum EasyView internet portal.
- Aplikacija EasyTouch App - Omogućuje korisnicima pregled i dijeljenje informacija o pumpi i CGM-u. Uređaj PDM automatski učitava podatke u aplikaciju EasyTouch App, koji se zatim mogu dijeliti i/ili pratiti na daljinu
- Aplikacija EasyFollow App – za pratitelje na daljinu, za pregled i praćenje statusa pumpe i/ili CGM-a u stvarnom vremenu.
- EasyView (Pro) – internet portal za korištenje od strane korisnika i zdravstvenog osoblja za daljinski pregled podataka pumpe i CGM-a te za pregled generiranih izvješća

¹IP28 1 sat neprekidno do dubine 2,5 m
²Pitajte svog zdravstvenog djelatnika o prednostima i prikladnosti korištenja Medtrum proizvoda

BAZALNI INZULIN

- Bazalna doza: nulta stopa do maksimalne bazalne doze od 25 U/h u koracima od 0,05 U/h
- 8 bazalnih obrazaca može se unaprijed programirati
- Do 48 bazalnih vremenskih segmenata tijekom 24 sata za svaki bazalni obrazac
- Privremena bazalna doza 0% do 200% (od 30 minuta do 24 sata)
- 6 obrazaca privremenog bazala može se unaprijed programirati
- Funkcija ručne suspenzije inzulina (15 min – 2 sata)
- Isporuka bazala se nastavlja i kada se prekine veza s uređajem PDM ili aplikacijom EasyPatch App (Bazalne doze su pohranjene u bazi pumpe)

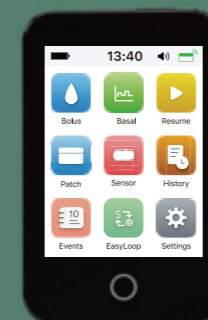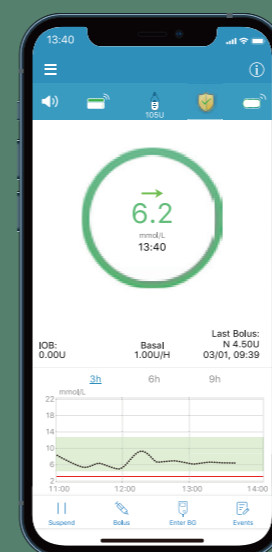

BOLUS INZULIN

- Daljinsko upravljanje Bolusom, upotrebom uređaja PDM ili aplikacijom EasyPatch App
- Minimalni bolus - 0,05 jedinica (0,05 U/2 sec)
- Maksimalni pojedinačni bolus - 30 jedinica
- Opcija: Normalan, Kombinirani i Produženi bolus (30 min-8 h)
- 6 unaprijed postavljenih bolus opcija
- Do 8 vremenskih odsječaka ugljikohidratnog omjera (200g maks.)
- do 8 vremenskih odsječaka za ISF (korekcijski faktor, inzulinska osjetljivost) (Maks. ISF 22.2)



EasyTouch App (iOS & Android)

TRENING I KORISNIČKA PODRŠKA

- Dostupno putem potvrde HZZO-a (Dodatna lista)
- Trening korisnika i zdravstvenih djelatnika
- Instrukтивni videozapisi, Vodič za brzi početak i Korisnički priručnici (www.cgm.hr)
- 24/7, 365 dana tehnička podrška (HR)
- Telefonska linija za pomoć
- Dostupna zamjenska pumpa u slučaju potrebe

